

# 移動式リフト EL-610

本体価格

**630,000** 円（非課税）

介護保険  
福祉用具  
貸与  
適応商品

made  
in  
**JAPAN**

JAN コード 4543085070507

TAIS コード 00084-000148

## 開放フレーム

ご利用者の足元にあるフレームが大きく開いていますから、吊り上げの際やチルト・リクライニングタイプの車椅子をご使用の際に足がぶつからず、安心して移乗できます。



## 旋回サポート

ペダルを踏み込むとフレーム下に収納された車輪が床に接地します。車輪を中心に回転しますから、省スペースかつ少ない力で操作できます。



## ハンガー位置ずれ低減

昇降にもなうハンガー位置のずれを最小限に抑えました。着座の位置決めがスムーズで、ずっこけ座りを防ぎます。



「やさしさ」  
かなえる  
新発想

## 新機能

## 新機能

## バッテリー残量計

バッテリーの残量はコントロールボックスで4段階の確認ができます。

本体スイッチまたは、手元スイッチのボタンを押すかバッテリーを着脱するとランプが点灯します。



## 小型軽量バッテリー

小型軽量のリチウムイオンバッテリーを採用していますから、脱着や充電の際の取り扱いが楽になりました。

また、劣化しにくい高寿命タイプで有害物質を含まず、環境に配慮しています。




## 昇降加速機能

無負荷時に加速ボタンを押すと昇降スピードがアップしますから、介助の時間が短縮できます。



## 機能紹介

## 仕様

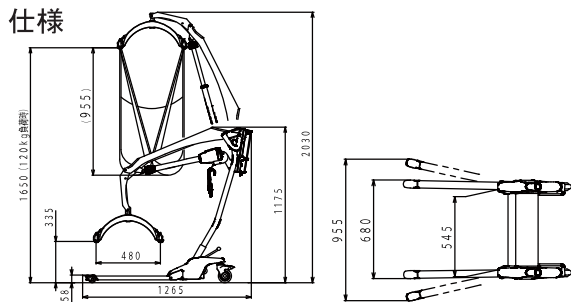

奥行	1,265 mm
全幅	680 ~ 955 mm
全高	1,175 ~ 2,030 mm
脚部高さ	58 mm
本体重量	49 kg
最大持ち上げ質量	120 kg
吊上げ高さ	335 ~ 1,650 mm (120 kg 負荷時)
キャスター径	前輪 50mm・後輪 100 mm
主要材質	スチール
バッテリー仕様	24V・2.9Ah 充電器・バッテリー 1 個付 バッテリーフル充電約 4 時間 90kg 負荷で約 22 回昇降可能 (2 回アーム昇降 + 1 回ベース開閉)

■バッテリーセット (付属のバッテリーと同じ状態)  
38,000円 (税込み価格 41,800円)

## 低床フレーム

高さ 5.8cm ですから、低床タイプのベッドでもご利用いただけます。

## 収納機能

収納ボタンを押している間、アームは下がり、ベースは閉じる動作を同時に行います。



## 吊り上げ高さ

床からの吊り上げができます。



## オプション


## リフト用スケール (検定品)

¥308,000(税込) ¥280,000(非課税)

※リフトと同時購入の場合、リフトと同数までは非課税

## 仕様

ひょう量	120kg
精度等級	3 級
寸法	124 (W) × 51 (D) × 173 (H) mm
重量	約 1.0kg
電源	単 4 形乾電池 6 本
その他	風袋引き機能付き BMI 表示機能付き ご購入済みの EL-570, 580, 600, IL-200, 210 にも取り付けできます。

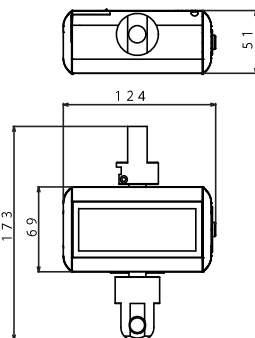

## 吊り具

身体状況や用途に合わせてお選びいただけます。(詳細は各営業所までお問合せください。)

いろいろオリジナル  
柔らかい肌触りのタイプ



MT-500

S, M 本体価格 54,000 円  
(税込価格 59,400 円)

L 本体価格 59,000 円  
(税込価格 64,900 円)



MT-600

S, M, L 本体価格 60,000 円  
(税込価格 66,000 円)

通気性の良いメッシュタイプ



MT-200

本体価格 50,000 円  
(税込価格 55,000 円)



MT-250

本体価格 60,000 円  
(税込価格 66,000 円)

着脱が簡単なタイプ



MT-300

本体価格 46,000 円  
(税込価格 50,600 円)

着脱が簡単セパレートタイプ



MT-400

本体価格 50,000 円  
(税込価格 55,000 円)



本社・松山営業所 / 〒791-0214 愛媛県東温市南野田410番地6  
TEL089 (964) 7770 FAX089 (964) 1522

東京支店 / TEL03 (5939) 8611 FAX03 (5939) 8612

札幌営業所 / TEL011 (788) 5334 FAX011 (788) 5341

仙台営業所 / TEL022 (781) 6715 FAX022 (781) 6796

北関東営業所 / TEL027 (212) 2066 FAX027 (212) 2067

名古屋営業所 / TEL0568 (42) 6015 FAX0568 (71) 9656

大阪営業所 / TEL06 (4860) 6601 FAX06 (4860) 6602

福岡営業所 / TEL0942 (45) 3808 FAX0942 (45) 3809

ホームページもご覧ください!  
動画配信中

いろいろ 検索  
メールアドレス info@iura.co.jp

お取り扱い

※カタログ記載の価格はいずれもメーカー希望小売価格です。

※価格、仕様は予告なく変更する場合があります。(※詳細は各営業所にお問合せください。)


(2023 年 6 月)



# 「抱き上げる」「支える」をサポートする 手動式リフト

## 簡易型移乗リフト ささえ手

- スリングシート不要の手動式リフトです。
- ベッド～車いす～トイレへの移乗がスリングシートを使わずに容易に行なえます。
- お尻を持ち上げた姿勢を維持できますので、下半身部分の脱衣に最適です。

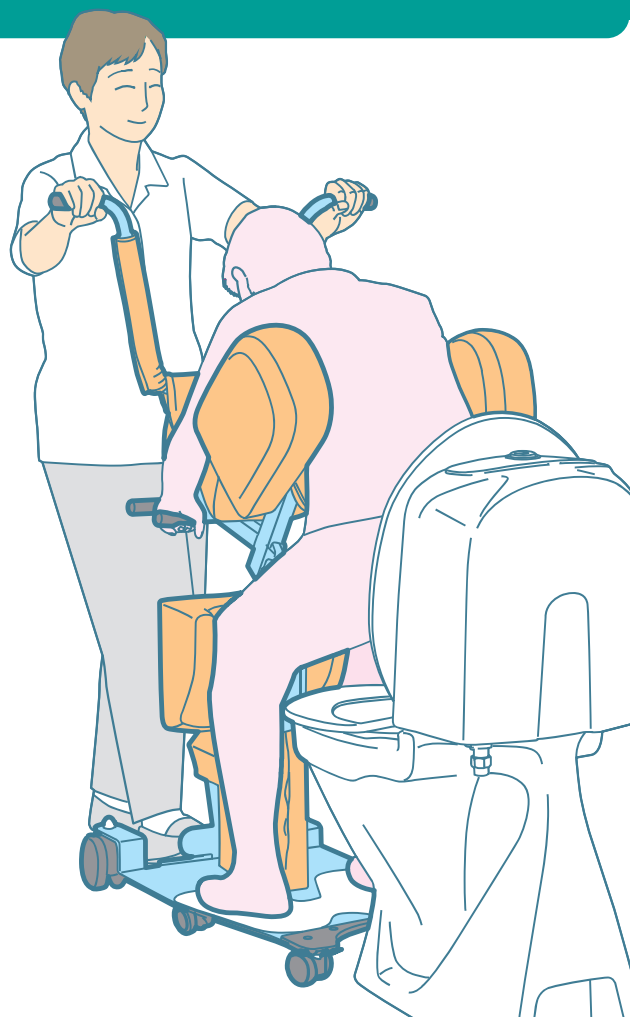

カーペットやクッションフロアでも移動がスムーズ！  
高性能な  
**大径キャスター**を用意しました！



1

胸パッドを差し入れ、  
ご利用者に密着させ  
ます。



2

ハンドルを引いて、  
ご利用者のお尻を持  
ち上げます。



3

ハンドルをいっぱい  
まで引き下げます。



## 別売オプション

### 専用胴巻きベルト



■補助ベルトではさ  
さえ上げ及び立  
位の維持が不安  
な方や、円背、骨  
盤の後傾により、  
ささえ手に近づき  
づらい方向への  
専用ベルト（特許  
出願中）。



### 専用補助ベルト

■小柄で脇パッド  
から抜けてしまう  
方や、抜ける不安  
のある方向への  
固定補助ベルト。



### 専用スリングシート

■骨盤が後傾してい  
て、ささえ手本体に  
近づけられない方  
や補助ベルト及び  
胴巻きベルトでは  
不安な方向への専用  
スリングシート。



商品番号		価 格
7031-00	ささえ手	¥409,000 (非課税)
7031-15	ささえ手 大径キャスター仕様	¥469,000 (非課税)
7031-12	ささえ手用大径キャスター式	¥60,500 (税込)

#### ▼別売オプション

7031-03	専用胴巻きベルト	¥38,500 (税込)
7031-01	専用補助ベルト	¥19,800 (税込)
7031-02	専用スリングシート	¥38,500 (税込)

※ささえ手と同時購入の場合、1枚に限り非課税となります。

【本体 ●寸法/外寸：(ベース部) 幅 40×長さ 76×高さ 5.9 (9.2cm)、ハ  
ンドル部高さ：84～120 (87.3～123.3)cm ●昇降/ガスダンパー併用

※ ( ) 内寸法は大径キャスター仕様です。



バッテリー寿命が大幅アップ! 管理も**超**楽に!

3年保証

耐荷重  
120kg

介護保険  
レンタル  
対象

**NEW**  
リチウム  
イオン電池  
搭載


# Y6セット Li-PINK

小柄な介助者でも使いやすく、車椅子でも正面からアプローチできます



リチウムイオン電池は


- 軽い
- コンパクト
- 容量・性能アップ  
2倍(当社比)

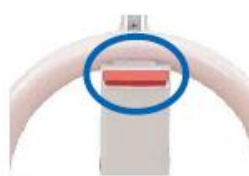

■ 押し易くなった  
緊急停止ボタン



■ リチウムイオン電池を  
充電器にセットするだけ  
本体充電ではありません

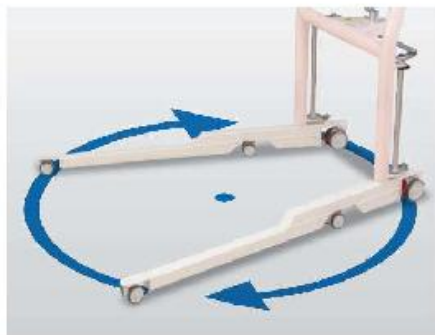

6輪キャスターで  
軽々自在に小回り回転



脚部は片手で軽く  
2秒で開閉



広い  
開放空間  
身体を引きずらず  
自然な動きで吊上げます

## リフト用デジタル体重計 MHS-2600〈検定付〉



つるべに乗ったまま体重測定が可能。  
体重測定が困難な方もリフト移送時に測定できます。  
BMI(体格指数)機能があり、栄養管理にも使用されています。


- 最小単位/100g
  - 電源/アルカリ単4乾電池6本
  - 風袋除去機能付き
- ※B-BBセット、Y4-Y6セット、TENにお付けできます。



## Y6セット Li-PINK 製品仕様

### Y6セット Li-PINK 外観寸法図

(単位:mm)

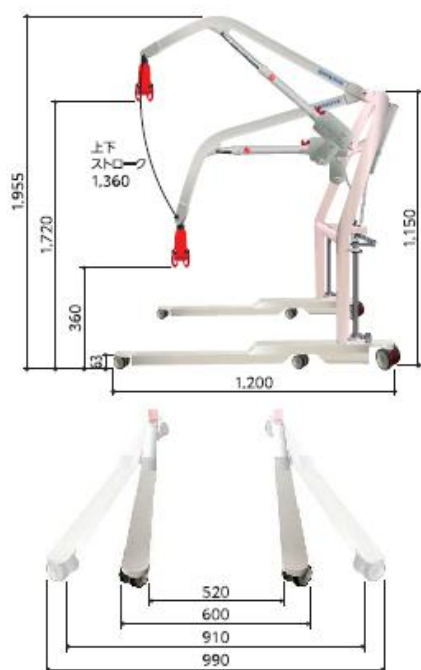

### Y6セット Li-PINK 仕様

昇降速度 上昇	36.3mm/sec
昇降速度 下降	37.2mm/sec
耐荷重	120kg
上下ストローク	約1,360mm
吊上げ高さ (最高)	床より 1,720mm
(最低)	床より 360mm
体重計装着時(最高)	床より 1,560mm
(最低)	床より 200mm
材質	スチール

### 搭載機能

緊急停止ボタン/エマージェンシースイッチ/クイックリリース/挟み込み防止/バッテリー残量表示

### リチウムイオン電池仕様

型式	BAL50
出力電源	25.2VDC
入力電源	29.4V
防水性能	IPX6
重量	0.9kg

つるべ-Y6セット Li-PINK

つるべ体重計付Y6Wセット Li-PINK

リチウムイオン電池

リフト用体重計(単品)



つるべ-Y6セット(鉛電池タイプ)

製造  
発売元



MORITOH CORPORATION

株式会社 モリトー

■本社 / 〒491-0074 愛知県一宮市東島町3-36

お客様相談室  
[24時間受付] ☎ 0120-65-2525

ホームページ モリトー で検索!

E-mail info@moritoh.co.jp

■札幌営業所 ■埼玉営業所 ■中部営業所 ■岡山営業所  
■仙台営業所 ■東京有明 ■大阪営業所 ■福岡営業所  
ショールーム

■販売店





## 株式会社 オフィス・ラボ

住所	〒791-1106 愛媛県松山市今在家4-9-32
電話 FAX	電話 089-958-2483 F A X 089-958-2109
代表者	代表取締役 田崎 純一
メール	<a href="mailto:itasaki@officelabo.co.jp">itasaki@officelabo.co.jp</a>
ホームページ	<a href="http://www.officelabo.co.jp">http://www.officelabo.co.jp</a>

企業理念	あなたの笑顔が私の笑顔
ミッション	会社に関わるすべての人の幸せの実現の為に 努力と協力を惜しみません。

事業内容
①介護家具の開発、製造、販売
②介護施設向け家具、介護用品の販売
③介護用品のレンタル卸業
④オフィス向け家具、事務用品の販売
⑤介護施設、オフィス向け 家具レイアウトサービス
⑥家具の搬入設置サービス
⑦イベントパネルのレンタル業

主なオリジナル商品	
ピタットチェア アシスト	スマイルチェア
世界一優しい介護椅子を目指して	体形に合わせて48通りのサイズに組換え可
<ul style="list-style-type: none"> <li>●介護保険レンタル対象</li> <li>●特許取得</li> <li>●45度で安全ロック付回転機能</li> <li>●前後スライド機能</li> <li>●リフトアップ機能</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●座面の高さ 3段階</li> <li>●座面の奥行き 2段階</li> <li>●肘掛け間の幅 2段階</li> <li>●背もたれ高さ 2段階</li> <li>●座面の角度 2段階</li> </ul>
	

主なオリジナル商品	
ピタットテーブル	ピタットクッション
自由に移動可能なパーソナルテーブル	置くだけ簡単な座位保持クッション
<ul style="list-style-type: none"> <li>●自由に移動、自由にレイアウト</li> <li>●個別に高さを簡単調整可能</li> <li>●滑りにくいガッチリキャスターで安心</li> <li>●高さは64 c m～94 c m 2 c mきざみ</li> <li>●つえボン S T 付</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●介護保険レンタル対象（車椅子付属品）</li> <li>●介助型、自走型車椅子どちらにも対応。</li> <li>●体幹が弱って体が傾く方の姿勢を保持。</li> <li>●姿勢が安定するとお食事もスムーズ。</li> <li>●置くだけ簡単セッティング</li> </ul>
	
サイドクッション ひじスポッ	杖ホルダー つえボン
姿勢の保持に役立ちます。	転倒リスクを減らします。
<ul style="list-style-type: none"> <li>●介護保険レンタル対象（車椅子付属品）</li> <li>●車椅子にも介護椅子にも簡単取付け。</li> <li>●体幹が弱って体が傾く方の姿勢を保持。</li> <li>●姿勢が安定するとお食事もスムーズ。</li> <li>●介助型車椅子専用</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●杖を倒れない様に保持します。</li> <li>●倒れた杖を拾う際の転倒事故が増えてます。</li> <li>●杖の置き場所を決めて転倒事故を減らします</li> <li>●取付け場所に合わせて5種類をご用意</li> </ul>
	



見守り支援システム

# 眠りCONNECT


「眠りSCAN」を利用した利用者様の  
見守り支援と個別ケアへの活用

体動センサ「眠りSCAN (NN-1530)」一般医療機器 届出番号 12B1X10020000130  
体動センサ「眠りSCAN (NN-1130)」一般医療機器 届出番号 12B1X10020000129



マットレスの下に  
敷くだけ！

パソコンや  
携帯端末で確認！

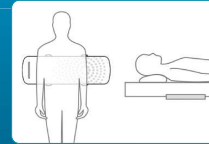

POINT

01

## リアルタイムモニター機能 状態の見える化・タイムリーなケア

### ▼リアルタイムモニター




\* 眠りCONNECTで確認できる心拍数・呼吸数は体動から算出した推定値です。

POINT


02

## 日誌表示機能 サービスの改善・状態変化に応じたケア

### ▼睡眠日誌

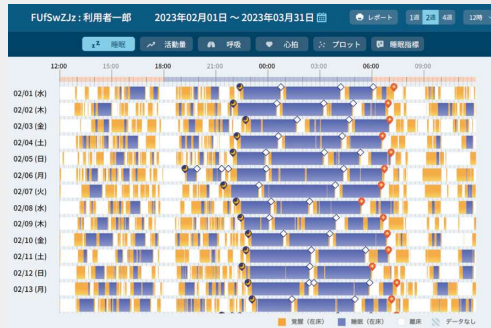

### ▼呼吸日誌・心拍日誌

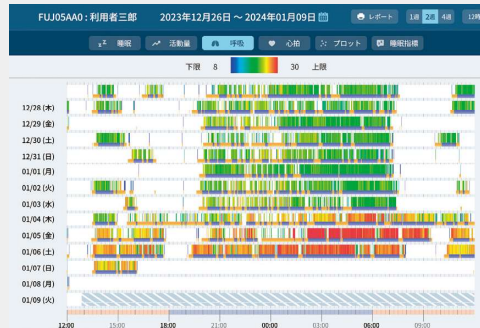

呼吸・心拍数が少ない  
▶青色系  
呼吸・心拍数が多い  
▶赤色系



POINT


03

## ダッシュボード・管理機能

### ▼ダッシュボード画面



### ▼管理機能

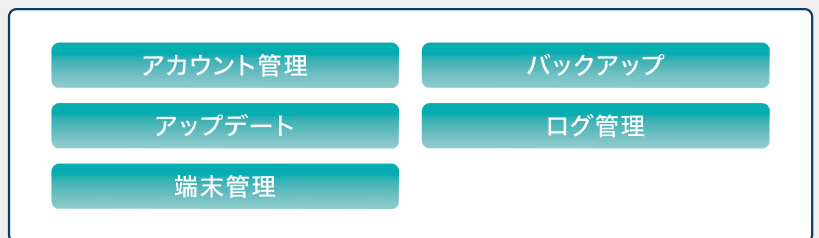

### パラマウントベッド株式会社

東京支店	〒136-8670	東京都江東区東砂2-14-5	TEL:03-3648-1171	名古屋支店	〒461-0001	愛知県名古屋市東区泉1-20-17	TEL:052-963-0600
札幌支店	〒060-0062	北海道札幌市中央区南2条西13-318-11	TEL:011-271-1181	大阪支店	〒550-0001	大阪府大阪市西区土佐堀2-3-33	TEL:06-6443-8791
仙台支店	〒984-0015	宮城県仙台市若林区卸町2-3-3	TEL:022-239-5211	高松営業所	〒761-8031	香川県高松市郷東町223-1	TEL:087-881-8900
さいたま支店	〒336-0967	埼玉県さいたま市緑区美園3-23-1	TEL:048-878-0100	広島支店	〒733-0011	広島県広島市西区横川町3-8-5	TEL:082-293-1311
横浜支店	〒194-0004	東京都町田市鶴間5-3-33	TEL:042-795-8800	福岡支店	〒812-0013	福岡県福岡市博多区博多駅東3-14-20	TEL:092-461-1131

## マールクッション

介護保険レンタル対象品

介護保険レンタル対象品

体位変換器

車いす付属品



しっかりと支えられるから安心して体を預けられる



「支える」ことに優れたクッションで、  
筋のリラックスを促しやすくなっています。

一般社団法人日本重度化予防ケア推進協会 理事長

特定非営利活動法人リハケアリングネットワーク 理事長

作業療法士 香川 寛 先生

ポジショニングクッションに一番必要な機能は、体や各部の重さを「支える」ことだと私は考えています。体にフィットすること、通気性、衛生面ももちろん大切です。これまで多くの現場の重度化を目の当たりにしてきて、ポジショニングに必要なポイントは、体の各部をしっかりと「支える」ことで筋の緊張を最小限にし、リラックスできる寝姿勢をいかに日常の中に取り入れることができるかだと考えています。

よくクッションの使い方をお伝えする時、現場から聞かれる声は「発汗」についてです。しかし体の各部がしっかり支えられていないことで筋の過緊張を生み、日常的に交感神経優位の状況になり、結果「発汗」が目立っている方もおられます。このような方は現場では汗かきだと表現されがちですが、しっかり体を支え、リラックスできる状況を提供することで発汗そのものが見られなくなったという事例も経験しています。

また現場で重度な拘縮を起こしている方の体形の特徴として、痩せ型が多いという特徴があります。痩せているということは、それだけで骨突出のために局所圧が上がりやすくなります。このような痩せ型の方ほど、褥瘡予防・拘縮予防のためにもしっかりとクッションで各部を支えていかなければなりません。

マールクッションは、このしっかり「支える」という点に優れているクッションです。しっかり各部を「支える」ことで安定性にも優れ、筋のリラックスを促しやすくなっています。筋のリラックスにより柔軟性を保ち、動きを守っていくという効果もあります。

また、「支える」ことで局所の圧をクッションに分散させやすいという特徴もあります。

マールクッションは、マットレス上でしっかり各部を預けることができている方、体が不安定で筋の過緊張を認める方、上半身や頸部の反り返りを軽減・予防したい方、褥瘡治療のために体圧分散を促していきたい方などにオススメのクッションです。



メーカー名		日本ケアリフトサービス株式会社	
製品名		SOEL CX-Line-HL	
型番・規格		CX-HL-101	分類 移乗支援(非装着)
販売価格		オープン	
製品 情報	画像		
	説明 (特徴等)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・高さ調整機能とキャスターによる移動機能が加わった直線レールタイプの据置型リフトです。部屋間の移設や寝台用エレベーターでの移動が可能です。</li> <li>・居室、脱衣室等での移乗介助はもちろん、床からの移乗にもお勧めです。</li> </ul> <p>《誰もが安心して使用できる安全機能》</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・スリングシートの抜け落ちを防止するセーフティラッチ構造のハンガー</li> <li>・安全な使用を音声でサポートする日本語音声アナウンス機能</li> </ul> <p>《あらゆる現場へご提案いたします》</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・SOELシリーズは、天井走行式(据置型・天井設置型)、床走行式、支柱式と豊富な機種展開でご要望にお応えいたします。</li> </ul>	
事業所名		株式会社アンパサンド(愛媛エリア担当)	
担当者		小前 誠治	
電話		080-3182-8018	FAX 082-846-6811
メール		<a href="mailto:komae@ampersand.top">komae@ampersand.top</a>	
ホームページ		<a href="http://www.ampersand.top">http://www.ampersand.top</a>	
メーカーホームページ		<a href="https://www.jcls.jp">https://www.jcls.jp</a>	



# Anymo

ポジショニングクッション エニモ

LOVING CARE  
**CAPE**  
ゼロ  
褥瘡0をめざして  
姿勢体位管理補助用具/  
体位変換器

- | 姿勢が崩れにくいユニークな構造設計で簡単に使える
- | 少ない数のクッションでポジショニングができる
- | 熱水洗浄・高温乾燥・消毒ができる



Mモデル



Bタイプ



Wタイプ



Vタイプ

Rモデル



600タイプ



800タイプ



## 「アルファプラ ネオート」とは

床ずれリスクの高い療養者には、エアマットレスが選ばれるケースが多い。でも、エアマットレス特有の「不安定さ」から引き起こされる悪影響に懸念があり選定に悩んでしまう。

そのような悩みを解決すべく、静止型マットレスメーカーならではの視点で、自動体位変換機能付静止型マットレス「アルファプラ ネオート」を開発しました。

「アルファプラ ネオート」は静止型マットレスの特長である体圧分散性能・快適性・安定性をそのままに、自動体位変換機能を搭載することで、療養者のADL維持と介護者の負担軽減を目指したマットレスです。「最幸な人生を過ごしてほしい」という願いが詰まっています。

### エアマットレスの不安定さによる影響例

- ADL低下
- 疼痛
- 不眠
- 筋緊張増大
- 酔い
- 介助のしづらさ
- ポジショニング併用困難

## 「アルファプラ ネオート」と睡眠

### 専門家に聞きました


「アルファプラ ネオート」と「体位変換機能付きエアマットレスA」を使用した場合の睡眠状態を計測し比較しました。

計測の結果「体位変換機能付きエアマットレスA」の「睡眠の質スコア」が67.5に対し「アルファプラ ネオート」は71.4と、統計的に有意な差が見られました。

「睡眠の質スコア」は、良質な睡眠の指標である「一晩を通して睡眠が安定しているか」「深いノンレム睡眠の時間が十分か」「レム睡眠の割合が適切か」の3つの要素を総合的に評価した(株)S'UIMINの独自の指標です。今回の計測では特に「睡眠の安定性」の差が顕著でした。

睡眠の安定性が低い場合、夜間に覚醒して再入眠に時間がかかってしまったり、深い睡眠が安定して取れなくなるため、睡眠による心身の回復に悪影響を与える可能性があります。

今回の結果は「アルファプラ ネオート」が持つ材質特性や体位変換機能が、より安定した質の高い睡眠をサポートする可能性を示唆しています。

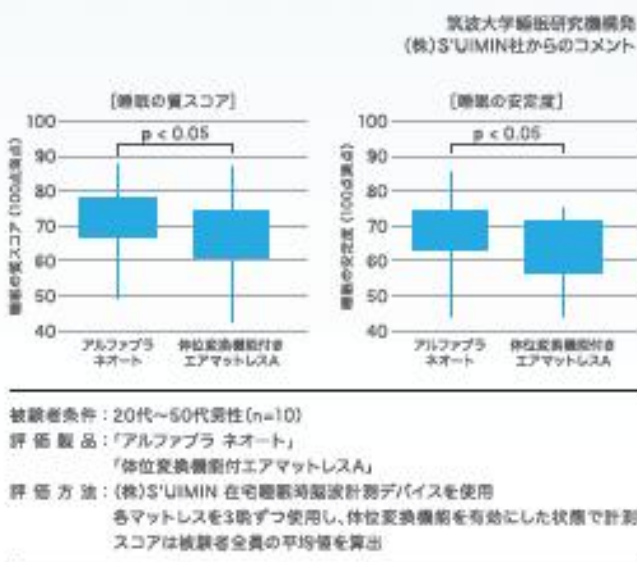

●本評価は特定の条件下で実施されたものであり、全ての利用者に同様の効果が得られることを保証するものではありません。

### アルファプラ ネオート カバー調試・抗菌加工済

型番	MB-NF3R	MB-NF3S	MB-NF1R	MB-NF1S
サイズ (cm)	幅83×長191×厚13	幅83×長180×厚13	幅91×長191×厚13	幅91×長180×厚13
質量 (kg)	10.5	9.5	11.0	10.0
TAISコード	00563-000193	00563-000194	00563-000195	00563-000196
希望小売価格 (非課税)	240,000円			

設置方法: リブレイズメント  
材質(中身): [マットレス部] ポリウレタンフォーム [エアセル部] ポリウレタンフィルム  
材質(カバー): [上面] 表地: ポリウレタン 裏地: ポリエステル [下面] ナイロン  
[エアポンプ] ケース: ABS樹脂

防水フィルムカバー  
表面、側面がウレタンフィルムで覆われたカバーです。  
清拭しやすく、汚物の浸透を防ぎます。

●サイズ、質量は目安の数値です。

### 使用方法／取扱上の注意

●「ePLA NE-AUTO」とプリントしてある面を上にしてご使用ください。



- 本製品に人を乗せたまま移動させないでください。落下して怪我をする恐れがあります。
- 本製品の箱を強くつかまないでください。内部が壊れる場合があります。持ち運びの際は、裏面にある持ち手をご利用ください。
- 強度な力(折り曲げる、強くにぎる、引っ張る、ねじる等)を加えないでください。
- 付属について、各機器の取り扱いに準ずる施設で使用する機器製品に用いる加工をお願いします。
- 製品の仕様は改善などのため、予告なしに変更することがあります。
- ePLA は株式会社タイカの登録商標です。

### お手入れ方法

カバーのお手入れ方法

●本製品のカバーを洗濯する際は、以下の注意事項をお守りください。

防水フィルムカバータイプ	
	手洗いしてください。 洗濯は、40℃を限度としてください。
	酸素系漂白剤は使用できますが、塩素系漂白剤は使用できません。
	タンブル乾燥はできません。
	アイロン掛けはできません。
	ドライクリーニングはできません。
	ウェットクリーニングはできません。

介護保険給付対象商品・床ずれ防止用具

TaicaWellness

自動体位変換機能付静止型マットレス

# ePLA NE-AUTO

アルファプラ ネオート

## 人生最幸マットレス

静止型マットレス専門メーカーが考えた

体圧分散性能・快適性・安定性に加え、

介護負担も軽減する自動体位変換機能付静止型マットレス



エアポンプ一体型  
(ビルトイン方式)



特許出願中

## について聞きました

起きているときは活動的に、夜はゆっくり休む。日中は本人の動く意欲や能力を発揮して欲しいけど、夜間は介護負担を軽減するため、自動で体位変換を行いたい。

「アルファプラ ネオート」は、このような方に以下の理由から最適なマットレスだと思います。

- 昼間は安定した静止型マットレスとして使用することで、起き上がりや座位保持、立ち上がりなどの動作が行いやすく、夜寝ている間は自動体位変換機能で、自然な寝返りに近い体位変換を実現。床ずれ防止と良質な睡眠を両立。
- ポジショニングの際にクッションも崩れにくく、エアマットレスと違い、長時間の安楽姿勢を安定して保つことが可能。
- 安定性の高い静止型マットレスのため、着替えやおむつ交換など、介護がしやすく介護負担を軽減。

総合リハビリ研究所 リボン結訪問看護ステーション

作業療法士 福祉用具プランナー管理指導者

菊池 隆一郎 さん

起きているときは活動的に、夜はゆっくり休む



TaicaWellness

株式会社タイカ ウェルネス事業本部

〒125-0054 東京都葛飾区高砂5-39-4

TEL:03-5648-6630 FAX:03-5648-6640


フリーダイヤル 0120-152047

ホームページ <https://taica.co.jp/pla/>





そのような願いから生まれた「アルファプラ ネオート」

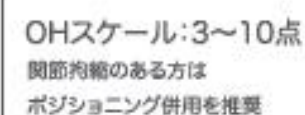

マットレス選びの際の  
大事なポイント

「アルファプラ ネオート」

- 腰心地の良さ: 突出部を包み込んでくれる適度な柔らかさと沈み込みすぎを防ぐ面での支え。
- 安定性: 動きやすさ(自立・介助共)とポジショニング時の安定性のための適度な硬さ。
- 体圧分散や自動体位変換機能: 広い面積で受けることのできる柔らかさと体位変換。

これらの機能は、対象者によってどのポイントを優先するかを考え、不足した機能に関しては工夫で補うことが必要でした。この課題を解決できるマットレスが、ウレタンフォームの下にエアセルを配置した「アルファプラ ネオート」と思います。

一般社団法人ナチュラルハートフルケアネットワーク 代表理事  
理学療法士  
下元 佳子 さん

静止型マットレスの  
快適性・安定性をそのままに。

療養者のADL維持と介護負担の軽減を目指したマットレスです。

ウレタンフォーム下に配置した6つのエアセルが、程やかに背、胸、腰の隅に押し上げ、人の自然な寝返りを再現します。

電圧ON時

エア圧 0分

フラット(5分)

右半身が上がる(3~5分)

フラット(10分)

エア圧 0分

フラット(25分)

左半身が上がる(3~5分)

上記サイクルは基本モードの場合です。

フラット      背+胸      背+胸+腰

横置したウレタンフォームの下にエアセルを配置したことで、静止型マットレスの特長である快適性・安定性を実現し、エアマットレス特有の不安定さ・浮遊感を軽減。リハビリテーションおよびボジョニングにも適し、ADL維持に貢献します。

操作を行うリモコンのボタンは、電源ボタンとモード切替ボタンの2つのみ。身体状況に合わせた3モードの選択で複雑で難しい設定の必要はありません。

基本モード	左側上げ→フラット→右側上げ→フラット
左側のみモード	左側上げ→フラット
右側のみモード	右側上げ→フラット

●消費者の足側から見た場合のマットレスの動きです。

〔構造図〕

エアポンプ


静音設計で、エアポンプ駆動中も驚くほど静か。  
夜間でも、快適にご使用いただけます。

【測定値】18.8dB (20dB:人の小さな寝息程度の音)  
【測定条件】無響室(当社が外部施設にて測定)  
エアポンプ駆動時、頭部近傍にて測定

マットレスカバー表面と側面に防水加工を施しており、アルコールや次亜塩素酸ナトリウムなどで清拭が可能です。抗菌加工により、表面における細菌の増殖を抑制します。


上層の柔らかめの高弾性無膜ウレタンフォームが、身体を優しく包み込み、優れた体圧分散性能を発揮します。

アルファブラ ネオート 男性BMI: 21.0 (当社測定)

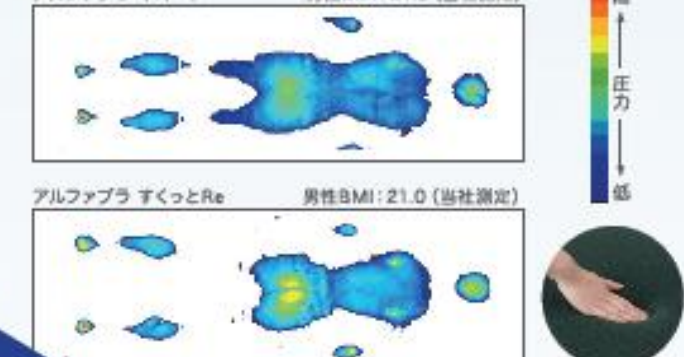

高弾性無膜ウレタンフォームの適度な弾力が身体を押し上げ、寝返り、起き上がり、ベッドからの立ち上がりといった一連の動作をサポートします。

■ 2.7kgのボールを動かすために要する力の比較

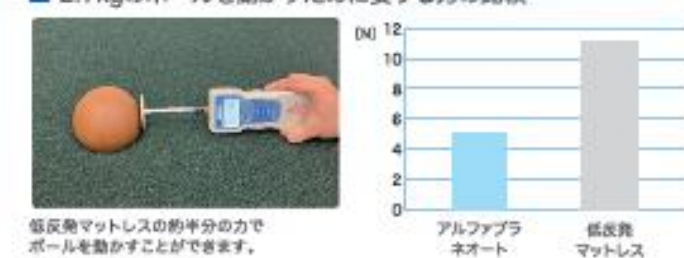

高弾性無膜ウレタンフォームの優れた通気性により、床ずれ発生の外的要因に影響を与える要因として関心が高まっているマイクロクライメイト(皮膚局所の温度・湿度)にも配慮しています。

各種センサーにてエアセル内の空気圧や温度等に異常がないか検知します。異常の際は、自動でエアポンプが停止し、リモコン上のランプにより、エラーが表示されます。

また、安全を考慮し、ベッドの背上げ時には内蔵された背上げセンサーによって背上げを検知し、自動で体位変換機能を停止させます。

背上げセンサー





スウェーデンより登場

スタンディングアシスト&ベルト

# Takeoff & Takeoff Belt

テイクオフ

テイクオフベルト

## 使用例

### ● 機能訓練

1. 立ち上がり状態の確認
2. 起居動作の補助
3. 術後やベッドサイドリハビリテーションでの使用

### ● 日常生活動作(ADL)支援

1. 室内の短距離移動
2. 足の踏み替えに代わる方向転換



テイクオフベルト



テイクオフ

## 使用対象者

\* 使用前に被介助者の動作状態の確認を行います

- 補助があれば立ち上がりや立位姿勢が取れて、バランスも取れる人
- スタンディングハンドルをつかめて、介助者の指示が理解できる人

## トイレ介助例



■ トイレに入室します



■ テイクオフベルトを巻き上げます



■ 着衣を下ろします



■ 着座します



■ 排泄中はハンドルを把持します



■ 立位姿勢をとります



■ 清拭し、着衣を整えます



■ トイレより退室します

こちらから、詳しい使用説明動画をご覧になれます。





## 立ち上がり状態の確認


既入院患者さんや入所者さんの動作状態の確認に使用できます。



被介護者の動作状態の確認を行います。



<座位姿勢の確認>

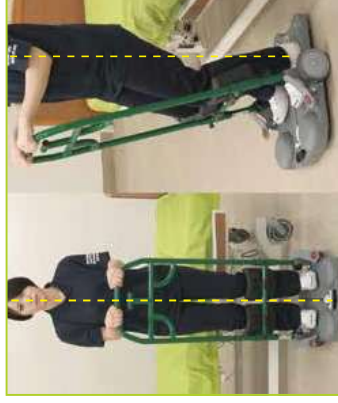

<立位姿勢の確認>

## 起居動作の補助

立位姿勢が取れる方の立ち上がり動作を補助します。



足型イラストに足を乗せます。



レッグサポートを調整します。



体の中心の位置を確認します。



ティクオフベルト(別売)と併用できます。



介護者は前方より補助します。



ストラップの長さを調整します。

## ベッドサイドリハビリテーション

手術後の立ち上がりや、ベッドサイドリハビリテーションのプログラムが実施できます。



立ち上がりトレーニングとして時間を測り、被介護者の動作状態の確認を行います。



ベッドの高さ調整により、負荷を変えてトレーニングができます。



重度被介護者にはティクオフベルトを併用します。

## 室内の短距離移動

被介護者の視線が高くなるため、視覚情報が増えます。足底に体重がかかり、自然に被介護者の下肢に力が入ります。



ポイント  
ティクオフ前方の大型車輪により、小さな段差を乗り越えられます。



敷居レベル例



カーペットの断端例



介護者は自分の方向にティクオフを引きます。



ティクオフベルト(別売)と併用できます。



<介護者1名>



<介護者2名>

## トイレ介助

コンパクト設計のベースにより、狭い空間でも取り回しができます。同じ基点でベースが回転できるので、トイレ介助がしやすいです。



狭い空間でもアプローチしやすいです。



被介護者の正面でスタンディングハンドルをつかめます。



半座位姿勢を取りやすいです。



その場で方向転換ができます。



ティクオフベルト(別売)と併用できます。



ストラップをTサポートに引っ掛けて姿勢を保持します。



ティクオフベルトの下部をまくり上げます。

## ティクオフベルト使用例 ◆歩行訓練 ◆車いす移乗

### 歩行訓練

ストラップハンドルをつかむことで、しっかりサポートできます。



<介護者1名>



<介護者2名>  
介護者の胸を交差させて、安定感を増したサポートができます。

### 車いす移乗

重度被介護者の場合はティクオフベルトとの併用をお勧めします。



お互いがストラップをつかめるので、姿勢が安定します。



被介護者の背面からサポートします。



<介護者2名>



<介護者2名>  
座奥へしっかり座れます。

被介護者のスポンやおむつをつかむ事なく、介護者は安定してサポートができます。



## ■ パーツ

### Takeoff テイクオフ



Tサポート



レッグサポート



ブレーキプレート



ベース

### Takeoff Belt テイクオフベルト



バックル付きベルトストラップ



ストラップハンドル



介助時の折り返し

## ■ アクセサリ

### Soft Cover Leg Support ソフトカバーレッグサポート

レッグサポートの当たりを和らげるソフトカバーです



#### < スペック表 >

型番	品名	サイズ	色・素材	耐荷重・重量	お手入れ	TAISコード JANコード	販売単位	定価(税抜)
----	----	-----	------	--------	------	-------------------	------	--------

#### ■ テイクオフ 介護保険：福祉用具貸与(移動用リフト)

TOFFM	スタンディングアシスト テイクオフ	ベース：横幅約47cm、奥行幅約57cm 製品全体：高さ約105cm	ベース：グレー、鉄 支柱：グリーン、鉄	耐荷重：150kg *身長180cm以下	柔らかい布で中性洗剤を使用。 溶剤不可。消毒が必要な場合は70%アルコールを使用。	01624-000030 4562110152384	1台	176,000円
-------	----------------------	---------------------------------------	------------------------	-------------------------	--	-------------------------------	----	----------

#### ■ テイクオフベルト 介護保険：福祉用具貸与(特殊寝台付属品) ●Sサイズ、Mサイズのみ適応

TOFFBXS	テイクオフベルト XSサイズ	90cm(腰囲(推奨)65-80cm)	綿、ポリエステル	耐荷重：150kg	洗濯機で洗濯が可能。 柔軟剤の使用はお控えください。	4562110152322	1枚	22,000円
TOFFBS	テイクオフベルト Sサイズ ●	105cm(腰囲(推奨)80-90cm)	綿、ポリエステル	耐荷重：150kg		01624-000031 4562110152339	1枚	22,000円
TOFFBM	テイクオフベルト Mサイズ ●	120cm(腰囲(推奨)90-105cm)	綿、ポリエステル	耐荷重：150kg		01624-000032 4562110152346	1枚	22,000円
TOFFBL	テイクオフベルト Lサイズ	135cm(腰囲(推奨)105-125cm)	綿、ポリエステル	耐荷重：150kg		4562110152353	1枚	22,000円

\*使用環境により耐荷重は異なります。

#### ■ アクセサリ

TOFFSC	ソフトカバー レッグサポート	横幅約20cm、奥行幅約20cm、 高さ約3cm	アウター：グレー、ポリウレタン (ポリエステルコーティング) インナークッション：ホワイト、 ポリウレタンフォーム	重量：62g *1個あたり	洗濯機で洗濯可能。柔軟剤は 使用不可。消毒が必要な場合は 70%アルコールもしくは45% イソプロパノールを使用。	4562110159529	2枚/ セット	20,000円
--------	-------------------	-----------------------------	--	------------------	--	---------------	------------	---------

※本品は医療機器ではありません。

※製品の色はカタログの色と多少異なる場合があります。※本製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※本製品に関するお問い合わせは、販売店もしくはシーマン株式会社までご連絡ください。

発売元



本 社 大阪市北区東天満1丁目12番10号 〒530-0044  
TEL(06)6354-7702 FAX(06)6354-7114  
東京支店 TEL(03)5207-3521 FAX(03)5207-3522  
九州支店 TEL(092)283-7400 FAX(092)283-7401  
名古屋支店 TEL(052)218-7337 FAX(052)218-7338

輸入元



大阪市北区東天満1丁目12番10号 〒530-0044



排泄ケア用

スタンディングリフト

**SKYLIFT<sup>i</sup>R**

スカイリフト iR SL-2023

介護保険・福祉用具貸与（移動用リフト）



狭い空間でもスイスイ！  
コンパクトで小回り抜群

車いすと同程度のコンパクトさ。  
車いすで移動ができるスペースがあれば、狭いトイレ内でも介助空間が確保できます。




軽い力で、ス〜ッと移動！  
ストレスフリーな走行性

床面の影響を受けにくい  
双輪キャスターで、負担なく  
軽い力で押し引き操作が  
行えます。



大きく開いて、超低床！  
どんな環境にもアクセスしやすい

- ・脚部が大きく開くので、電動車いすやシャワーキャリーにもストレスなくアクセスできます。
- ・後輪キャスターの高さを 63 mm まで低くし、低床ベッドにも対応できます。

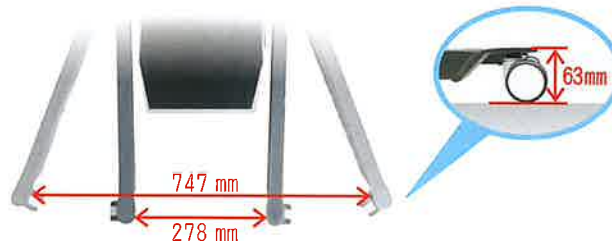

介護するひと、されるひと。トイレで笑顔のスキリケア

下衣の上げ下げ



便器への移乗



座位保持



清拭・パッド交換

